

BENUTZERHANDBUCH



Dieses Handbuch MUSS dem Benutzer des Produkts ausgehändigt werden. Lesen Sie dieses Handbuch, BEVOR Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es für den Fall auf, dass Sie es benötigen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.


Die in diesem Handbuch gezeigten Fotos sind nicht vertraglich bindend.

Joëlette *and Co*

by Ferriol-Matrat

www.joeletteandco.com

EINLEITUNG	1
FUNKTIONALITÄT	1
GARANTIE	1
DAS SOFAO	2
SOFAO BEDIENUNG	2
ALLGEMEINE FAHRTECHNIK	3
<u>Am Pool</u>	3
<u>Am Meer</u>	3
INSTALLATION DES PASSAGIERS AUF DEM SOFAO	4
<u>Die Übertragung</u>	4
<u>Das Halten</u>	4
<u>Komfort</u>	4
SICHERHEITSREGELN IN SOFAO	4
<u>Begleitperson</u>	4
<u>Versicherung</u>	4
<u>Während des Schwimmens</u>	4
ZERSPLITTERTE ANSICHT DES SOFAO	5
WARTUNG	6
PFLEGE UND WARTUNG	6
REINIGUNG	6
DESINFEKTION	6
INSPEKTIONSLISTE	6
LANGZEITLAGERUNG	8
NACH DEM GEBRAUCH	8
ABFALLWIRTSCHAFT	8
TECHNISCHE MERKMALE	8
AUFKLAPPEN DES SOFAO	11
KONTAKT	14

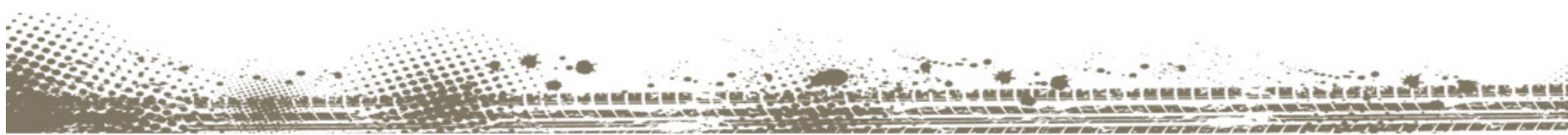

EINLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Handhabung des SOFAO. Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Wenn Ihnen die Schrift in der gedruckten Version des Benutzerhandbuchs aufgrund ihrer Größe zu schwer lesbar erscheint, können Sie das Handbuch im PDF-Format von der Website www.joeletteandco.com herunterladen. Sie können dann die Schriftgröße auf dem Bildschirm anpassen, um Ihren Sehkomfort zu verbessern.

WARNUNG

Jeder ernsthafte Vorfall, der im Zusammenhang mit der Verwendung des Sofao auftritt, muss dem Hersteller gemeldet werden.

FUNKTIONALITÄT

Verwenden Sie das Sofao nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Ist dies nicht der Fall, können Sie sich und andere Personen in Gefahr bringen. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll lediglich auf bestimmte Situationen hinweisen, die die Funktionalität Ihres Sofao beeinträchtigen können.

Sie sollten die Nutzung Ihres Sofao einstellen, wenn seine Funktionalität insbesondere aus den folgenden Gründen beeinträchtigt ist:

- Versagen des Verriegelungssystems der Rückenlehne (Indexfinger)
- Versagen des Verriegelungssystems der Sitzfläche (Indexfinger)
- zu geringer Reifendruck
- beschädigte Schwimmkörper
- Bespannung der Sitzfläche, der Rückenlehne und der Beinstützen beschädigt
- beschädigte Haltevorrichtung
- beschädigte, geknickte, eingeklemmte oder von der Halterung gelöste Kabel

GARANTIE

Die Garantie beträgt zwei Jahre. Das SOFAO muss bestimmungsgemäß verwendet, sorgfältig behandelt und gepflegt werden. Unfallgefahr und Verlust der Garantie bei mangelnder Pflege und Wartung (Seite 6).

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Unfällen aufgrund von unbemerktem Verschleiß ist es äußerst wichtig, dass das Sofao mehrmals jährlich und mindestens einmal pro Jahr überprüft wird.

Wenn Sie ein Problem mit einer Fehlfunktion an Ihrem Sofao haben, greifen Sie nicht selbst ein, da Sie sonst die Garantie verlieren könnten, sondern kontaktieren Sie uns.

Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen beträgt 5 Jahre.

SOFAO

Der SOFAO ist ein Bade- und Einstiegsstuhl, mit dem eine Begleitperson ihren Passagier vom Auto zum Einstieg ins Wasser bringen kann, ohne dass ein Transfer oder ein speziell angepasster Zugang erforderlich ist.

Die Begleitperson gewährleistet den Ein- und Ausstieg aus dem Wasser über den vorderen Griff.

Die Innovation besteht in der Verwendung von vier stabilisierenden Schwimmern, die den Passagier während eines echten Bades unterstützen, wobei der Körper bis zu den Schultern unter Wasser ist.

Nach dem Schwimmen kann die Entspannung folgen, immer noch ohne Transfer, da der Sofao durch einfaches Neigen der Rückenlehne zu einer bequemen Liege wird.

Der Sofao ist ohne Werkzeug vollständig zusammenklappbar, kann zusammengerollt werden und passt in den Kofferraum eines Kleinwagens, um ihn überall hin mitzunehmen.

Er ist für eine Vielzahl von Nutzern mit unterschiedlichen Bedürfnissen konzipiert.

SOFAO BEDIENUNG

Das Sofao kann je nach den gewählten Optionen auf verschiedene Arten gesteuert werden:

- Ohne Option ist es am einfachsten, das Sofao mit dem vorderen Griff zu ziehen.
- Mit der Poolrolle schieben Sie das Sofao mithilfe des hinteren Lenkers.
- Mit dem Tire-Sofao soll das Sofao von vorne gezogen werden. Es wird empfohlen, das zusätzliche Paar Räder mit dieser Option zu verwenden.



Einstellung der Rückenlehne :

- Stellen Sie sich hinter das Sofao und halten Sie die Oberseite der Rückenlehne fest.
- Drücken Sie mit dem Fuß auf das zwischen den Rädern befindliche Kabel und neigen Sie die Rückenlehne nach vorne oder hinten, um sie nach Belieben einzustellen.

ALLGEMEINE FAHRTECHNIK

IM SCHWIMMBAD

- Um die Treppe eines Schwimmbads hinunterzusteigen, stellen Sie sich auf die Rückseite des Sofao mit dem Rücken zum Hang. Fahren Sie rückwärts ins Wasser, während Sie den Rollstuhl festhalten. Um die Treppe hinaufzusteigen, wenden Sie sich dem Stuhl zu und ziehen Sie ihn am Griff aus dem Wasser.

Die Treppe hinuntergehen



Die Treppe hinaufgehen



- Wenn der Pool über eine Rampe verfügt, positionieren Sie sich hinter dem Sofa und gehen Sie in Fahrtrichtung.



- Um das Sofa über einen Rand ins oder aus dem Wasser zu heben, halten Sie das Sofa am Lenker nach hinten und halten Sie dann die Absenkung fest oder ziehen Sie den Rollstuhl aus dem Wasser. Diese Manipulation kann auch von zwei Personen durchgeführt werden, wobei eine Person vorne und eine hinten sitzt.



AM MEER

Stellen Sie sicher, dass das Wasser leicht zugänglich ist. Wenn der Sand locker ist, empfehlen wir die Verwendung des zusätzlichen Radpaars (optional), um das Fahren des Rollstuhls zu erleichtern.

INSTALLATION DES PASSAGIERS AUF DEM SOFAO

DIE ÜBERTRAGUNG

Wenn der Passagier nicht in der Lage ist, sich selbstständig von seinem Rollstuhl auf das Sofa zu transferieren, tragen Sie den Passagier und setzen Sie ihn auf den Badestuhl.

DAS HALTEN

Vor jedem Schwimmen oder jeder Fahrt sollten Sie die Sicherheitsgurte an den Beinen und am Oberkörper des Passagiers befestigen.

KOMFORT

Stellen Sie vor jeder Fahrt die Neigung der Rückenlehne ein, um dem Fahrgast den bestmöglichen Komfort zu bieten.

SICHERHEITSREGELN IN SOFAO

BEGLEITPERSON

Zum Fahren des Sofa ist nur ein Pilot erforderlich. Auf See muss ein zweiter Pilot anwesend sein, um zu verhindern, dass der Sessel abdriftet.


VERSICHERUNG

Es ist Pflicht, dass jede Begleitperson über eine Haftpflichtversicherung verfügt. Für die Nutzung von Sofa ist keine spezielle Versicherung erforderlich, aber diese Praxis muss Ihrem Versicherer mitgeteilt werden.

WÄHREND DES SCHWIMMENS

- Halten Sie sich an die Anweisungen der Bademeister.
- Überprüfen Sie das Seewetter und benutzen Sie das Sofa nicht bei Wellengang, Wellen und Wind.
- Die Begleitperson muss immer eine Hand auf der Rückenlehne des Sofa halten.
- Baden Sie nicht außerhalb von bewachten Badegebieten.
- Eine Begleitperson sollte immer in der Nähe des Sofas sein. Auf See muss eine zweite Begleitperson anwesend sein, um zu verhindern, dass der Rollstuhl abdriftet.

ZERSPLITTERTE ANSICHT DES SOFAO

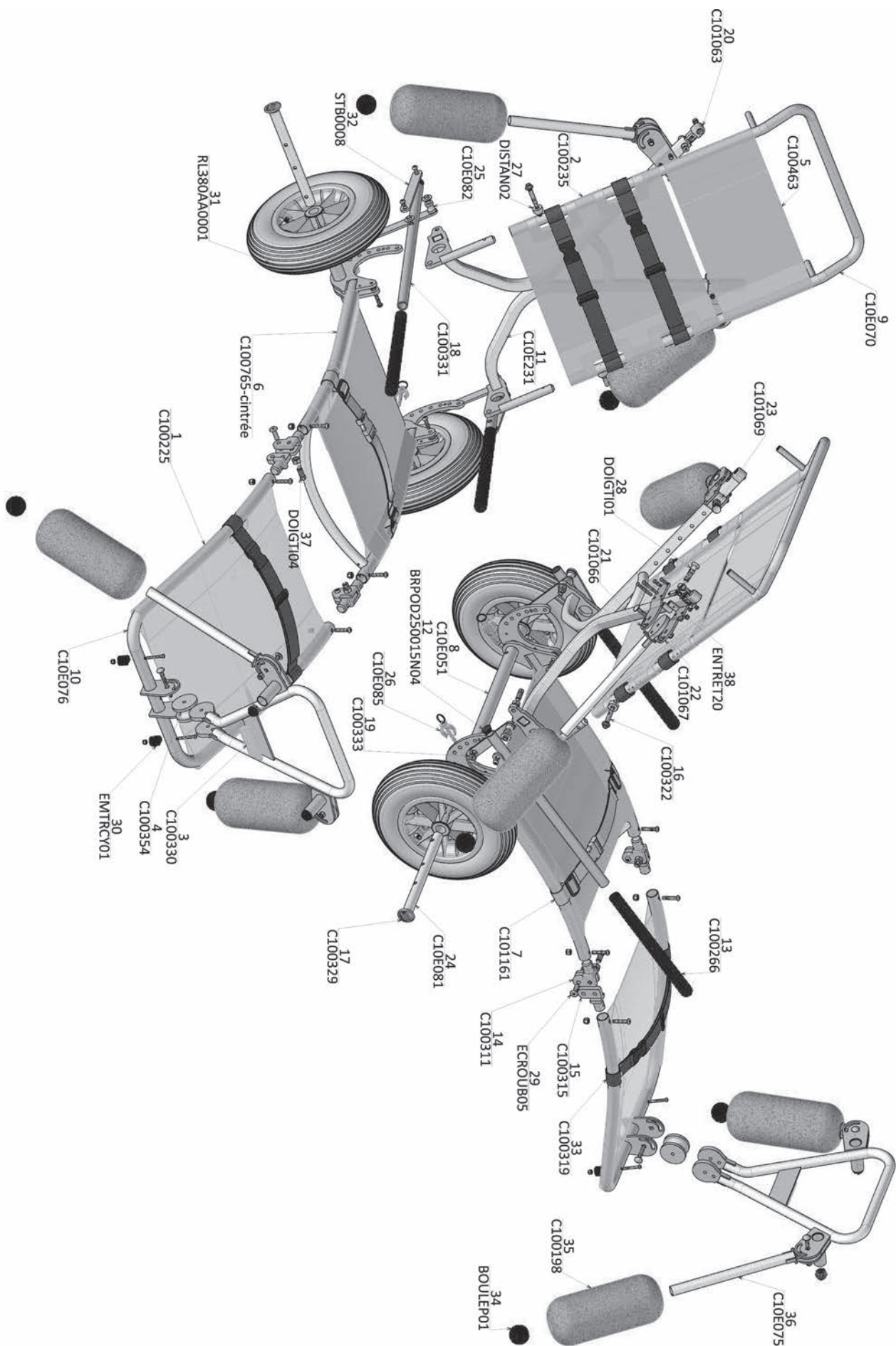

WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG

Der Begriff «Wartung» eignet sich für alle Aktivitäten, die das Sofa in gutem Zustand halten und seine Fahrtüchtigkeit gewährleisten. Die Wartung umfasst verschiedene Bereiche wie regelmäßige Reinigung, Inspektionen, Reparaturen und Generalüberholungen.

Sie sollte unabhängig von der Häufigkeit der Nutzung mindestens einmal pro Jahr durchgeführt werden. Bei regelmäßiger Nutzung (mehrmals pro Woche) ist eine zweite Wartung erforderlich.

Sie besteht aus der Überprüfung von :

- den Reifendruck
- das Vorhandensein der Sicherheitsstifte.

REINIGUNG

Beachten Sie bei der Reinigung des Sofas folgende Punkte:

- Spülen Sie den Sessel nach jedem Gebrauch ab, um die korrodierende Wirkung von Salz oder Chlor zu verringern.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel für die Reinigung.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte.

DESINFEKTION

Eine Desinfektion mit geprüften und anerkannten Desinfektionsmitteln auf einem feuchten Tuch oder durch Aufsprühen ist erlaubt. Beim Robert-Koch-Institut unter <http://www.rki.de> finden Sie eine Liste der derzeit zugelassenen Desinfektionsmittel für die feuchte Reinigung mit einem Tuch oder durch Sprühen.

INSPEKTIONSLISTE

Die folgenden Tabellen enthalten eine Liste der Inspektionen, die der Nutzer in den entsprechenden Intervallen durchführen sollte.

Vor jeder Verwendung des Sofao

ELEMENT	KONTROLLE DER INSPEKTION	IM FALLE EINES SCHEITERNS
System zur Verriegelung der Sitzfläche	Stellen Sie sicher, dass sich die Indexfinger frei und ohne Einklemmen bewegen lassen und dass die Sitzfläche gut verriegelt ist.	Kontaktieren Sie uns
	Achten Sie darauf, dass der Indexfinger fest auf den Gelenken sitzt.	Ziehen Sie den Indexfinger mit einem 12er und einem 19er Maulschlüssel fest.
Reifen	Vergewissern Sie sich, dass die Reifen nicht beschädigt sind und dass es keine undichten Stellen an den Luftventilen gibt.	Kontaktieren Sie uns
	Stellen Sie sicher, dass der Reifen auf den richtigen Druck aufgepumpt ist.	Pumpen Sie den Reifen auf. Beachten Sie die Tabelle Haupttradreifen im Kapitel «Technische Daten». Für die Reparatur des Schlauchs wenden Sie sich an uns oder an einen Fahrradhändler.
Vorhandensein von Stiften und Sicherungsstiften	Vergewissern Sie sich, dass die Stifte der Radachsen vorhanden sind.	Kontaktieren Sie uns
Haltevorrichtung	Achten Sie darauf, dass die Gürtelschnallen ihre Funktion einwandfrei erfüllen. Überprüfen Sie die Nähte auf Beschädigungen.	Kontaktieren Sie uns

Regelmäßig

ELEMENT	KONTROLLE DER INSPEKTION	IM FALLE EINES SCHEITERNS
Alle Batyline-Leinwände	Überprüfen Sie die Sitzfläche auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen. Überprüfen Sie, ob die Reißverschlüsse der Sitzflächen richtig geschlossen sind.	Kontaktieren Sie uns

LANGZEITLAGERUNG

Wenn Sie Ihr Sofa über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie es für die Lagerung vorbereiten, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Wir empfehlen, das Sofa bei einer Temperatur von 15°C zu lagern und extreme Temperaturen zu vermeiden, um die Lebensdauer des Sofas und des Zubehörs zu verlängern.

Die Komponenten sind für höhere Temperaturbereiche getestet und zugelassen, die im Folgenden näher erläutert werden:

- Der zulässige Temperaturbereich für die Lagerung des Fahrzeugs liegt zwischen -20 °C und +40 °C.
- Lagern Sie in einer trockenen, gut belüfteten und vor äußeren Einflüssen geschützten Umgebung.
Pumpen Sie den Reifen leicht auf.

NACH DEM GEBRAUCH

ABFALLWIRTSCHAFT

- Die Verpackung der Geräte geht zum Materialrecycling.
- Metallteile gehen zum Recycling von Altmetallen.
- Kunststoffteile werden dem Kunststoffrecycling zugeführt.
- Die Abfallentsorgung muss gemäß den jeweils gültigen nationalen gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

TECHNISCHE MERKMALE

Die technischen Informationen in diesem Dokument gelten für die Standardkonfiguration für das Sofa oder stellen theoretische Maximalwerte dar.

Diese Daten können sich ändern, wenn Zubehör hinzugefügt wird.

Nb: Beachten Sie, dass in einigen Fällen die gemessenen Werte um +/- 10 mm abweichen können.

BEDINGUNGEN UND ORTE FÜR DIE ERLAUBTE VERWENDUNG UND LAGERUNG	
Betriebstemperaturbereich	Von -10 bis +50°C
Temperaturbereich für die Lagerung	Von 0 bis +50°C

REIFEN	
Art der Reifen	8" x 3,5", pneumatisch
Druck	2,5 bar

REIFEN	
Gesamthöhe	1140 - 692 mm (Rückenlehne aufgerichtet - geneigt)
Gesamtbreite	754 mm
Gesamtlänge	1560 - 2455 mm (Rückenlehne und Griffe angehoben - abgesenkt)
Höhe der Sitzfläche	295 mm
Breite der Sitzfläche	495 mm
Tiefe der Sitzfläche	530 mm
Höhe der Rückenlehne	510 mm
Winkel Rückenlehne	90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 °
Sitzwinkel	9°
Höhe der Armlehne	200 mm
Länge Armlehne	335 mm
Bodenfreiheit	154 mm
Maße der Aufbewahrung	1035mm (länge) x 610mm (breite) x 475mm (höhe)

GEWICHT	
Leergewicht	17 kg

LADUNG	
Max. Belastung	100 Kg

AUFKLAPPEN DES SOFAOS



1. Entfernen Sie die Sicherungsstifte an den Radachsen.



2. Entfernen Sie die Radachsen.



3. Schieben Sie die Räder mit dem Ventil nach außen auf ihre Achsen und setzen Sie die Achsen wieder in die ihren Sitz.



4. Setzen Sie die Sicherungsstifte wieder ein.



5. Rückenlehne aufklappen



6. Sitzfläche ausklappen



7. Drücken Sie auf das Kabel der Sitzfläche, um die beiden Teile auszurichten.



8. Vor dem Schwimmen entfalten Sie die vier Schwimmer

Zum Falten des Sofas gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Ein Video ist auf unserer Website www.joeletteandco.com verfügbar.



Joëlette and Co
by Ferriol-Matrat

Hergestellt von

FERRIOL-MATRAT

ZI CHARLES CHANA

3 RUE DE LA GALERIE

42230 ROCHE LA MOLIERE - FRANKREICH

FERRIOL-MATRAT - ZI Charles Chana – 3 rue de la Galerie 42230 Roche la Molière

Tel: +33 (0)4.77.42.62.58 / **Fax :** 33(0)4.77.37.72.79

Mail : export@joeletteandco.com

SARI au capital de 500 000 € - SIRET 423 501 055 00028 – APE: 2550B - TVA : FR 87 423501 55

KONTAKT

ZÖGERN SIE NICHT, DAS TEAM VON JOËLETTE AND CO ZU
KONTAKTIEREN FÜR ALLE FRAGEN



export@joëletteandco.com

KUNDENDIENST : jc-odin@joëletteandco.com



0033 (0)4 - 77 - 42 - 62 – 58

Schließen Sie sich der Joëlette's Community in den sozialen Netzwerken an!



@FERRIOL-MATRAT – ALL RIGHTS RESERVED

Dieses Handbuch ist durch das Gesetz vom 11. März 1957 über literarisches und künstlerisches Eigentum, ergänzt durch das Gesetz vom 3. Juli 1985, und durch alle auf das Urheberrecht anwendbaren Konventionen geschützt. In Anwendung dieser Gesetze und Konventionen ist es nicht gestattet, das Handbuch, die Programme oder Systeme ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FERRIOL-MATRAT ganz oder teilweise zu reproduzieren, zu kopieren oder zu vervielfältigen. FERRIOL-MATRAT behält sich das Recht vor, diese Produkte zu überarbeiten und zu verbessern. Diese Veröffentlichung beschreibt den Stand des Produkts zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und greift möglichen Entwicklungen nicht vor.